

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	福爾免接觸額溫槍	申請廠商	泰博科技股份有限公司
--------	----------	------	------------

福爾免接觸額溫槍 型號: TD-1241 製造批號: 製造日期:  製造廠名稱: 泰博科技股份有限公司五股廠 製造廠地址: 新北市五股區五工二路127號B1-7樓 藥商名稱: 泰博科技股份有限公司 藥商地址: 依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容 刊載(市售品須刊載實際地址) 本產品為醫療精密器材， 搬運時請勿重摔！ 衛部醫器製字第005378號	福爾免接觸額溫槍 型號: TD-1241B 製造批號: 製造日期: BT MAC: 110. 4. 28 製造廠名稱: 泰博科技股份有限公司五股廠 製造廠地址: 新北市五股區五工二路127號B1-7樓 藥商名稱: 泰博科技股份有限公司 藥商地址: 依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容 刊載(市售品須刊載實際地址) 本產品為醫療精密器材， 搬運時請勿重摔！ 衛部醫器製字第005378號
---	---

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

使用者您好：

感謝您購買福爾免接觸額溫槍。請您先閱讀本使用說明書，以確保正確、安全地使用本產品。並請您將說明書留著，供日後隨時參考。本產品採用紅外線 (IR) 量測技術測得人體額頭溫度。

警告與注意事項

- ◆ 使用任何溫度計時，正確的操作方法才得以獲得精確的溫度讀數，請在使用前詳細閱讀本手冊。
- ◆ 本產品的操作溫度範圍在 10°C 至 40°C 之間 (50°F~104°F)，相對濕度小於 95%。
- ◆ 請將本產品存放在陰涼乾燥的地方，-20°C 至 60°C (-4°F~140°F)，相對濕度低於 95%。
- ◆ 避免陽光直射。
- ◆ 避免掉落溫度計，若不慎掉落且溫度計經認為已經受損，請立即聯絡客戶服務部門。
- ◆ 請勿碰觸鏡片。
- ◆ 請勿自行拆卸溫度計。
- ◆ 應隨時採取基本的安全防護措施，特別是使用本溫度計於兒童或行動不便人士或在其附近使用時。
- ◆ 本產品的用途不在於取代專業醫師的意見。

使用之前請務必詳閱本使用說明書並遵照指示使用。

使用限制

在測量溫度前，請先檢查量測探頭是否乾淨。

預期用途

本產品適用於間歇性測量和監測人體體溫。


福爾免接觸額溫槍

FORA No touch forehead thermometer

使用說明書


型號：TD-1241

產品外觀圖示

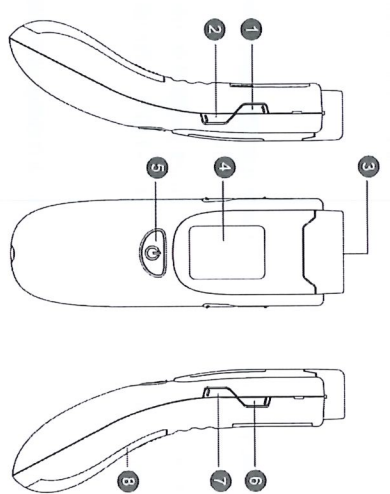

1. 攝氏/華氏切換鍵(°C/°F)
2. 設定鍵(SET)
3. 溫度感測探頭
4. 顯示螢幕
5. 電源/靜指鍵(ON/OFF)
6. 量測模式鍵(MODE)
7. 記憶鍵(MEM)
8. 電池蓋

顯示螢幕

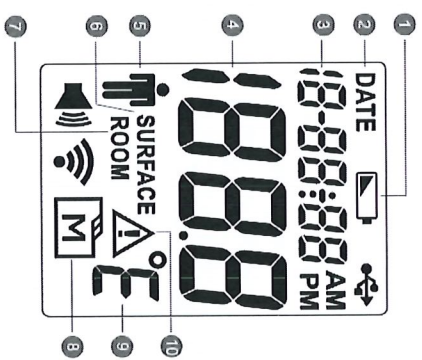

1. 低電量顯示
2. 日期符號
3. 日期/時間顯示區
4. 量測結果顯示區
5. 量測人體溫度模式
6. 量測物體表面溫度模式
7. 測量室溫模式
8. 記憶模式
9. 溫度單位
10. 錯誤訊息符號

機器設定


當您為第一次使用，或是更換電池之後需要設定溫度計。

步驟一、

按電源鍵()開啟溫度計，之後長按設定鍵()5秒進入設定模式。

步驟二、設定日期與時間

- 按下量測模式鍵或攝氏/華氏切換鍵選擇正確的年份
- 按下設定鍵()確認並跳至下一步驟
- 按下量測模式鍵或攝氏/華氏切換鍵，選擇正確的月/日/小時/分鐘

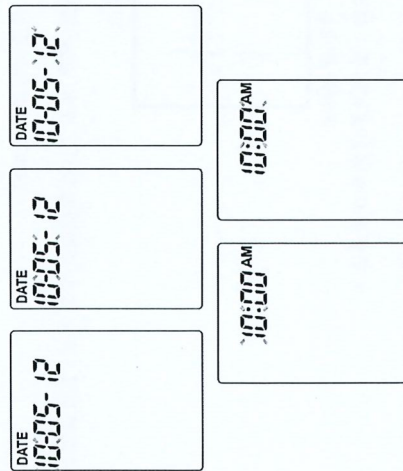

當完成所有設定後，機器會自動關機。


請注意:當機器在設定模式下閒置超過 30 秒，機器將會自動關機。

選擇溫度單位

本機器提供攝氏及華氏(°C/°F)兩種量測溫度單位的選擇。


步驟一、按電源鍵()開啟溫度計。

步驟二、按攝氏/華氏切換鍵(°C/°F)選擇。您可再按一次電源鍵()開始量測溫度，或是讓機器閒置 30 秒後自動關機。

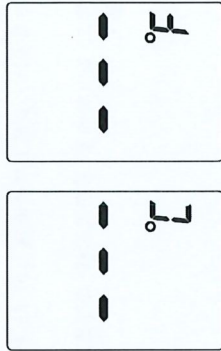

安裝電池

本產品使用兩顆 1.5V AA 鹼性電池，當機器螢幕顯示 ，表示電量過低。當  與  符號同時顯示時，請您遵循以下步驟立即更換電池。

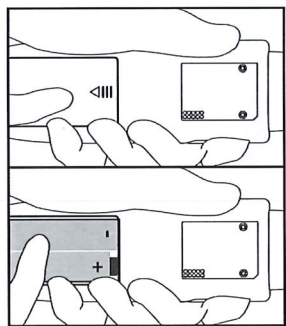

步驟一、
依圖示箭頭指示方向取下電池蓋

步驟二、
取下舊電池，並換上新的兩顆 1.5V AA 鹼性電池

步驟三、蓋上電池蓋。若安裝正確，您可聽到“通”一聲。

請注意：


1. 雖螢幕出現  時仍可運作，但仍建議您更換電池，以獲得準確的量測結果。
2. 若有長時間不會使用機器，請取出電池。
3. 電池應放置於孩童不易取得之處。若有誤吞食情況，請立即就醫。

量測溫度

◎ 量測體溫


步驟一、按電源鍵()開啟溫度計。

步驟二、按下量測模式(MODE)鍵以選擇體溫模式，此時螢幕會出現  符號。

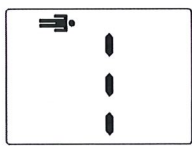


步驟三、將量測探頭靠近前額。

按住掃描鍵()不放。並確保探頭是不是平坦，靠近額頭的角度。執行額頭上測量距離在 5 厘米。

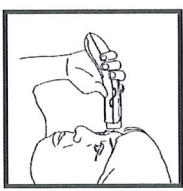

步驟四、讀取量測結果
放開掃描鍵，量測結果將顯示在螢幕上。

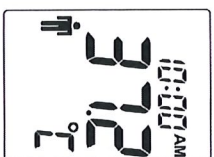

請注意：


- 由於額頭上的測量溫度可能受到汗水、出油和外部環境影響，量測結果僅供做參考。
- 如果探頭放置的位置與額頭測量位置形成角度，則讀取值可能會受到環境溫度的影響。
- 當機器閒置 30 秒後將會自動關閉。

記憶模式

本產品可儲存最近的 30 筆量測結果。

步驟一、請確保在開機狀態下開啟記憶模式。

步驟二、按電源鍵()開啟機器。

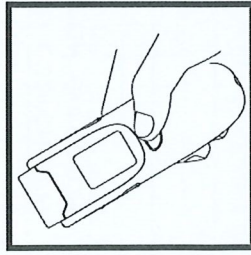

步驟三、按下記憶鍵(MEM)進入記憶模式。

每按一下記憶鍵，機器螢幕將依序顯示量測結果(包含時間/日期)，從最近一次的量測結果開始顯示。

當記憶筆數已滿，最久的歷史紀錄將被刪除，新的紀錄會被保留。當最後一筆記錄顯示在螢幕上，按下記憶鍵，會再返回第一筆記錄。

步驟四、離開記憶模式

按電源鍵離開記憶模式或閒置 30 秒機器將會自動關機。

維護與保存

- 溫度感測探頭並無防水功能。請使用乾淨、乾燥的棉花棒擦拭並清潔內側的探頭。
- 本產品主體並無防水功能。切勿將之放在水龍頭下方沖洗或浸泡在水中。請使用柔軟、乾燥的抹布進行擦拭。請勿使用具有磨粒的清潔劑。
- 請將本產品存放在涼爽、乾燥的地方。遠離灰塵，避免陽光直接照射。

錯誤訊息

下表為您在操作機器的過程中可能遇到的問題，請依照“解決方法”來排除問題，若還是無法解決，請您聯絡當地經銷商尋求協助。

訊息	代表意義	解決方法
E-1 ▲	環境溫度超出範圍	請在 10°C 至 40°C (50°F 至 104°F) 的環境溫度下操作機器
E-2 ▲		
	電池電量低	請盡快更換新的電池。
E-4 ▲	機器內部發生問題	請重新測試一次。若仍無法解決問題，請與當地經銷商聯繫。
LO HI	量測結果超過範圍	請詳細閱讀說明書重新測試一次。

產品規格

型號	TD-1241
尺寸重量	150mm(L) x 48.48mm(W) x 55.16mm (H), 128.8g (含電池)
電源	2 顆 1.5 V AA 鹼性電池
顯示溫度範圍 (體溫模式)	34.4°C 至 42.2°C (94°F 至 108°F)
解析度	0.1 °F/0.1°C
準確度	±0.2°C (±0.36°F) · 36.0°C (96.8°F) 至 39.0°C (102.2°F) ±0.3°C (±0.54°F) · <36.0°C (96.8°F) 和 >39.0°C (102.2°F)
溫度單位	°C 或 °F
操作環境溫度	10°C 至 40°C (50°F 至 104°F)
操作環境濕度	相對濕度 95%以下
保存環境溫度	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
保存環境濕度	相對濕度 95%以下
記憶筆數	30 筆

衛部醫器製字第 005378 號
 製造廠名稱:泰博科技股份有限公司五股廠
 製造廠地址:新北市五股區五工二路 127 號 B1-7 樓
 藥商名稱:泰博科技股份有限公司
 藥商地址: 依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

福爾免接觸額溫槍

FORA No touch forehead thermometer

使用說明書

型號: **TD-1241B**

使用之前請務必詳閱本使用說明書並遵照指示使用。

本產品涉及個人資料之蒐集、處理及利用，應遵守個人資料保護法之規定

使用者您好：

感謝您購買福爾免接觸額溫槍。請您先閱讀本使用說明書，以確保正確、安全地使用本產品。並請您將說明書留著，供日後隨時參考用。本產品採用紅外線（IR）量測技術測得人體額頭溫度。

警告與注意事項

- ◆ 使用任何溫度計時，正確的操作方法才得以獲得精確的溫度讀數，請在使用前詳細閱讀本手冊。
- ◆ 本產品的操作溫度範圍在 10°C 至 40°C 之間 (50°F~104°F)，相對濕度 30~85%。
- ◆ 請將本產品存放在陰涼乾燥的地方，-20°C 至 60°C (-4°F~140°F)，相對濕度 30~85%。
- ◆ 避免陽光直射。
- ◆ 避免摔落溫度計，若不慎掉落且溫度計經認為已經受損，請立即聯絡客戶服務部門。
- ◆ 請勿碰觸鏡片。
- ◆ 請勿自行拆卸溫度計。
- ◆ 應隨時採取基本的安全防護措施，特別是使用本溫度計於兒童或行動不便人士或在其附近使用時。
- ◆ 本產品的用途不在於取代專業醫師的意見。
- ◆ 使用傳輸功能之前，請先確認機器與藍牙接收裝置已完成配對，且在藍牙傳輸範圍之內。


使用限制

在測量溫度前，請先檢查測量探頭是否乾淨。

預期用途


本產品適用於間歇性測量和監測人體體溫。

產品外觀圖示

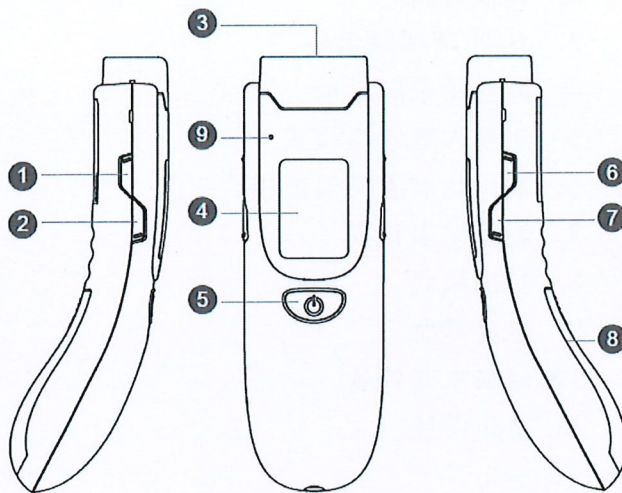

1. 攝氏/華氏切換鍵(°C / °F)
2. 設定鍵(SET)
3. 溫度感測探頭
4. 顯示螢幕
5. 電源/掃描鍵(POWER)
6. 測量模式鍵(MODE)
7. 記憶鍵(MEM)
8. 電池蓋
9. 藍牙傳輸指示燈

顯示螢幕

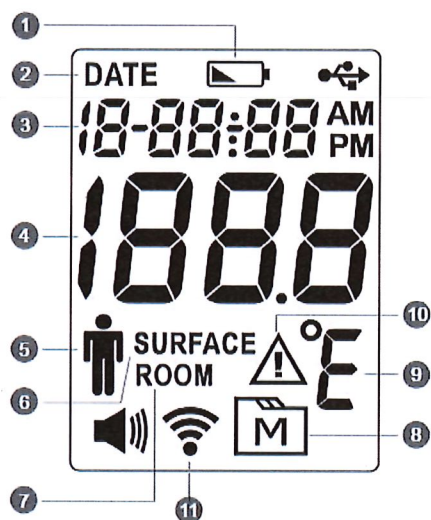

1. 低電量顯示
2. 日期符號
3. 日期/時間顯示區
4. 測量結果顯示區
5. 測量人體體溫模式
6. 測量物體表面溫度模式
7. 測量室溫模式
8. 記憶模式
9. 溫度單位
10. 錯誤訊息符號
11. 藍牙符號

機器設定


當您為第一次使用，或是更換電池之後需要設定溫度計。

步驟一、

按電源鍵()開啟溫度計，之後長按設定鍵()5 秒進入設定模式。

步驟二、設定日期與時間

- 按下測量模式鍵或攝氏/華氏切換鍵選擇正確的年份
- 按下設定鍵() 確認並跳至下一步驟
- 按下測量模式鍵或攝氏/華氏切換鍵，選擇正確的月/日/小時/分鐘

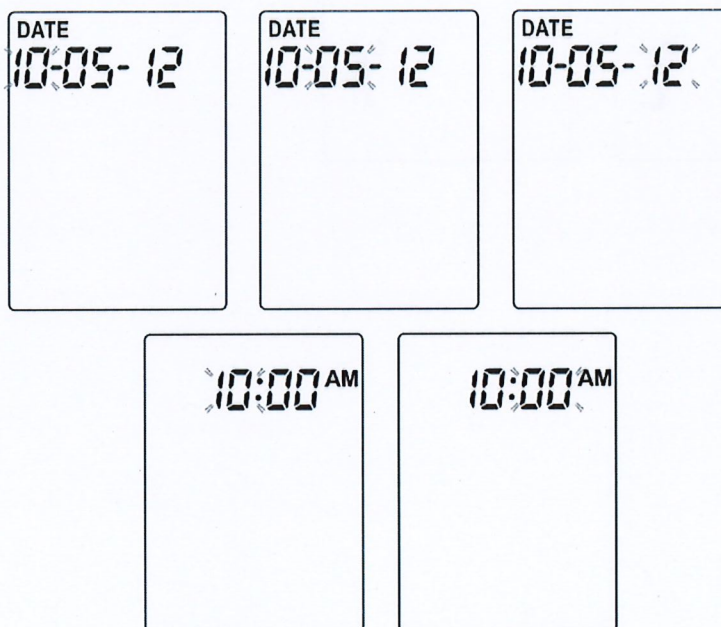

當完成所有設定後，機器會自動關機。


請注意:當機器在設定模式下閒置超過 30 秒，機器將會自動關機。

選擇溫度單位

本機器提供攝氏及華氏($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)兩種測量溫度單位的選擇。


步驟一、按電源鍵()開啟溫度計。

步驟二、按攝氏/華氏切換鍵($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)選擇。您可再按一次電源鍵()開始測量溫度，或是讓機器閒置 30 秒後自動關機。

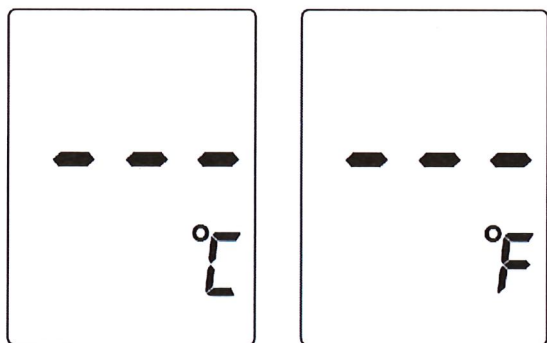

安裝電池

本產品使用兩顆 1.5V AA 鹼性電池，當機器螢幕顯示 ，表示電量過低。當  與  符號同時顯示時，請您遵循以下步驟立即更換電池。

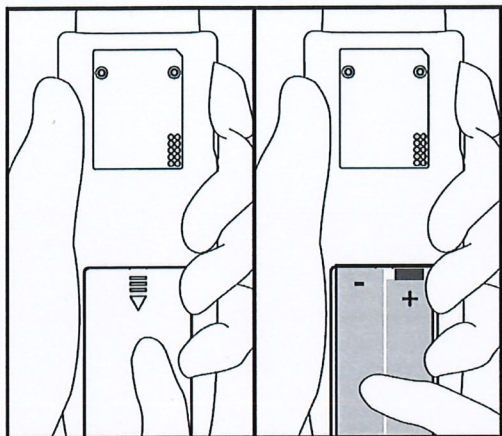

步驟一、
依圖示箭頭指示方向取下電池蓋

步驟二、
取下舊電池，並換上新的兩顆 1.5V AA 鹼性電池

步驟三、蓋上電池蓋。若安裝正確，您可聽到“逼”一聲。

請注意：


1. 雖螢幕出現  時仍可運作，但仍建議您更換電池，以獲得正確的測量結果。
2. 若有長時間不會使用機器，請取出電池。
3. 電池應放置於孩童不易取得之處。若有誤吞食情況，請立即就醫。

測量溫度

◎ 手動掃描


步驟一、按電源鍵()開啟溫度計。

步驟二、按下測量模式(MODE)鍵以選擇人體體溫模式，此時螢幕會出現  符號。

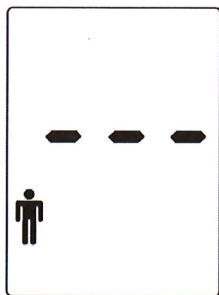


步驟三、將測量探頭靠近前額。

按住掃描鍵()不放。並確保探頭是不是平坦，靠近額頭的角度。執行額頭上測量距離在 3~7 厘米。

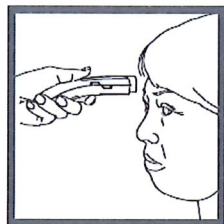

步驟四、讀取測量結果

放開掃描鍵，測量結果將顯示在螢幕上，此時藍牙指示燈亮起，表示機器正在進行資料傳輸。

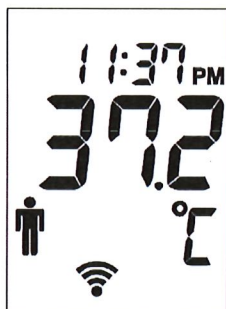

◎ 自動測量

步驟一、按電源鍵()開啟溫度計。

步驟二、將測量探頭靠近前額，並確保探頭是不是平坦，靠近額頭的角度。執行額頭上測量距離在 3~7 厘米。

步驟三、讀取測量結果

完成測量後，結果將顯示在螢幕上，此時藍牙指示燈亮起，表示機器正在進行資料傳輸。

請注意：


- 由於額頭上的測量溫度可能受到汗水、出油和外部環境影響，測量結果僅供做參考。
- 如果探頭放置的位置與額頭測量位置形成角度，則讀取值可能會受到環境溫度的影響。

記憶模式

本產品可儲存最近的 30 筆測量結果。

步驟一、請確保在關機狀態下開啟記憶模式。

步驟二、按電源鍵(🔌)開啟機器。

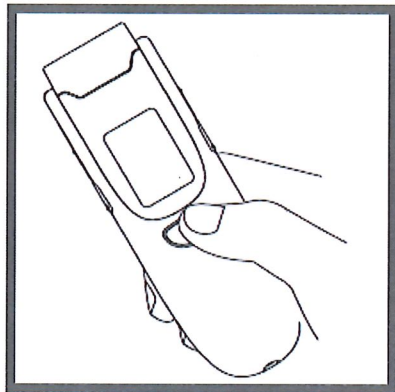

步驟三、
按下記憶鍵(MEM)進入記憶模式。

每按一下記憶鍵，機器螢幕將依序顯示測量結果(包含時間/日期)，從最近一次的測量結果開始顯示。

當記憶筆數已滿，最久的歷史紀錄將被刪除，新的紀錄會被保留。當最後一筆記錄顯示在螢幕上，按下記憶鍵，會再返回第一筆記錄。

步驟四、離開記憶模式

按電源鍵離開記憶模式或閒置 30 秒機器將會自動關機。

維護與保存

- 溫度感測探頭並無防水功能。請使用乾淨、乾燥的棉花棒擦拭並清潔內側的探頭。
- 本產品主體並無防水功能。切勿將之放在水龍頭下方沖洗或浸泡在水中。請使用柔軟、乾燥的抹布進行擦拭。請勿使用具有磨粒的清潔劑。
- 請將本產品存放在涼爽、乾燥的地方。遠離灰塵，避免陽光直接照射。

8
縫
裝
管

錯誤訊息

下表為您在操作機器的過程中可能遇到的問題，請依照"解決方法"來排除問題，若還是無法解決，請您聯絡當地經銷商尋求協助。

訊息	代表意義	解決方法
 	環境溫度超出範圍	請在 10°C 至 40°C (50°F 至 104°F) 的環境溫度下操作機器
	電池電量低	請盡快更換新的電池。
	機器內部發生問題	請重新測試一次。若仍無法解決問題，請與當地經銷商聯繫。
	測量結果超過範圍	請詳細閱讀說明書重新測試一次。

產品規格

型號	TD-1241B
尺寸重量	150mm(L) x 48.48mm(W) x 55.16mm (H), 74.0g (不含電池)
電源	2 顆 1.5 V AA 鹼性電池
顯示溫度範圍 (體溫模式)	32°C 至 44°C
解析度	0.1 °F/0.1°C
傳輸方式	藍牙傳輸
準確度	±0.2°C (±0.36°F) , 36.0°C (96.8°F) 至 39.0°C (102.2°F) ±0.3°C (±0.54°F) , <36.0°C (96.8°F)和 >39.0°C (102.2°F)
溫度單位	°C 或 °F
操作環境溫度	10°C 至 40°C (50°F 至 104°F)
操作環境濕度	相對溼度 30~85%
保存環境溫度	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
保存環境濕度	相對溼度 30~85%
記憶筆數	30 筆

藍牙 APP：

系統需求：iOS 12.0 或以上版本。



衛部醫器製字第 005378 號

製造廠名稱:泰博科技股份有限公司五股廠

製造廠地址:新北市五股區五工二路 127 號 B1-7 樓

藥商名稱:泰博科技股份有限公司

藥商地址: 依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

0.

言
逢
物



型號:TD-1241



型號:TD-1241B

